

ロウ義歯コーティング用石膏

人工歯の移動を
しっかりガード！


HOL D STONE

ホールディーストーン



別格 プロ仕様
の分離力

他社品

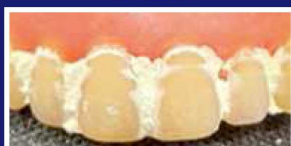

ホールディーストーン



掘出し時

ポロッと取れる コーティング
石膏!!

無分割法 に最適




&



DSブランドからの**スピンオフ**品！

だから**高品質**!!

- ・人工歯の移動が減少
DSシステムと併用すればリマウント不要
- ・クリーミィで盛り上げ易い
- ・レジン床が滑らかに仕上がる

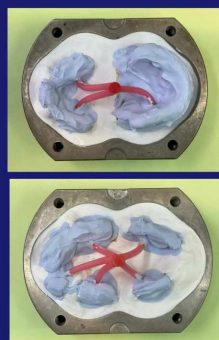

3kg

【使用方法】(1)標準混水比は粉末100gに対し水24ml (2)練和時間は真空攪拌器で30～60秒
(3)スパチュラや筆などで薄く(約2mm)均一に、ろう義歯にコーティングしてください。

硬化時間:10min, 硬化膨張:0.20%, めれ圧縮強さ:47.1Mpa, 乾燥後:78.5Mpa ※試験方法: JIST6605による 届出番号 27B3X00046000004 号

オーディック株式会社

〒553-0003

大阪市福島区福島7-14-20

TEL: 06-6451-7385 FAX: 06-6451-7365

土日祝を除く9:00～17:00(受付16:30終了)

URL: <http://www.odic-go.com/>

